


Teste de gravidez Ultra Antecipado



Para autodiagnóstico. Leia atentamente este folheto antes de realizar um teste.

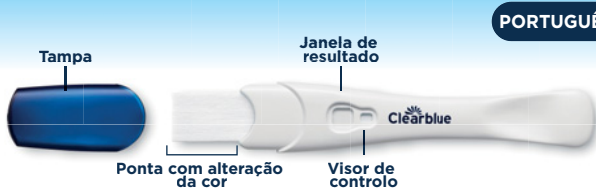

Faça o teste a partir de
6 dias
antes da
menstruação em falta!



Se fizer o teste antecipadamente, use a primeira urina da manhã

Caso contrário, pode fazer o teste a qualquer momento



Não beba muitos líquidos

antes de fazer o teste

Leia o resultado em 10 minutos



1 Fazer o teste

Retirar do invólucro, retirar a tampa e utilizar imediatamente.
Colocar a ponta com alteração da cor:

IMPORTANTE: mergulhe completamente a ponta como mostrado



no seu
fluxo
urinário

5
segundos

ou



numa
amostra
de urina
recolhida

20
segundos

IMPORTANTE: a ponta com alteração da cor muda instantaneamente para rosa, indicando que a urina está a ser absorvida. **Comece a contar assim que vir a ponta com alteração da cor tornar-se rosa.** Coloque a tampa e pouse a vareta de teste na horizontal. Se a ponta não ficar completamente rosa, consulte "Erros de teste".

2 Aguardar



Uma linha no visor de controlo pode começar a aparecer rapidamente, mas tem de **AGUARDAR 3 MINUTOS COMPLETOS** antes de interpretar o resultado.
Se não aparecerem linhas azuis, consulte "Erros de teste".

3 Resultados

Grávida - se o seu resultado for Grávida consulte o seu médico.

Imagem A



Janela de resultado

Visor de controlo

Imagem B



Imagem C



Não Grávida (veja a P2).



Se tiver dúvidas quanto ao seu resultado, veja a P6.

SE VIR DUAS LINHAS, ESTÁ GRÁVIDA. NÃO IMPORTA SE AS LINHAS ESTÃO POUCO NÍTIDAS OU MUITO ESCURAS.

Uma linha azul tem de estar presente no visor de controlo para que o seu resultado seja válido. Caso contrário, consulte "Erros de teste". **IMPORTANTE!** Leia o resultado no prazo de **10 minutos** depois de efetuar o teste. Ignore quaisquer alterações depois deste período de tempo.

Perguntas e respostas

1 O meu resultado é positivo (Grávida). O que devo fazer?
Consulte o seu médico, que a poderá aconselhar sobre os passos a tomar de seguida. É possível obter um resultado positivo e vir a descobrir mais tarde que já não está grávida (consulte a P7).

2 O meu resultado é negativo (Não Grávida). O que é que significa?
Pode não estar grávida ou o nível da hormona de gravidez pode estar abaixo do limite de deteção. Repita novamente o teste dentro de três dias. Se o resultado deste teste for negativo ("Não Grávida") e a sua menstruação estiver em atraso, consulte o seu médico.

3 Com que antecedência é que posso fazer o teste?
Este teste pode ser usado até 6 dias antes da menstruação em falta (5 dias antes do dia esperado para a menstruação). No entanto, como os níveis hormonais variam de mulher para mulher e podem ser muito baixos no início da gravidez, pode estar grávida mas, ainda assim, obter um resultado negativo. O gráfico abaixo mostra a percentagem de gravidezes detetadas em testes laboratoriais com amostras de urina no início da gravidez:

Dias até à menstruação em falta	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Gravidezes detetadas	>99%	>99%	>99%	>99%	96%	79%

4 Como funciona o teste Clearblue?
Deteta a hormona de gravidez hCG (gonadotrofina coriónica humana) na urina. A sensibilidade do teste é de 10 mIU/ml. Apresenta uma precisão superior a 99% em testes laboratoriais a partir do dia esperado para a menstruação.

5 O resultado pode ser afetado por medicamentos ou outras situações clínicas?
Antes de fazer o teste, leia sempre as instruções do fabricante de qualquer medicamento que esteja a tomar. Os medicamentos que contêm hCG e determinadas situações clínicas raras podem provocar resultados positivos falsos. Uma gravidez ectópica ou uma gravidez recente, mesmo que não tenha sido levada a termo, pode gerar resultados erróneos. Se já estiver na menopausa ou estiver a aproximar-se da menopausa, poderá obter um resultado de gravidez falso mesmo não estando grávida.

O teste **NÃO** deverá ser afetado por terapias hormonais contendo citrato de clomifeno, analgésicos comuns, álcool, antibióticos ou a pílula anticoncepcional. Se obtiver resultados inesperados, consulte o seu médico.

6 E se tiver dúvidas quanto ao meu resultado?
Se vir duas linhas azuis no prazo de 10 minutos após o teste, isso significa que está grávida, não importa se as linhas estão pouco nítidas ou muito escuras.

Resultados positivos

Figura A Existe uma maior probabilidade de isto acontecer se fizer o teste antes do dia esperado para a menstruação, quando os níveis de hCG podem estar relativamente baixos.

Figura B Esta situação pode acontecer se fizer o teste perto do dia esperado para a menstruação, uma vez que os níveis de hCG ainda são relativamente baixos.

Imagem C Esta situação pode acontecer se fizer o teste vários dias depois do dia esperado para a menstruação, dado que os níveis de hCG estão mais elevados.

Se ainda tiver dúvidas quanto ao resultado, aguarde, pelo menos, 3 dias antes de fazer o teste novamente, seguindo atentamente as instruções.

7 Fiz um teste que produziu um resultado "Grávida". Fiz o teste novamente e o resultado foi "Não Grávida" ou a minha menstruação começou. O que é que significa?
É possível obter um resultado positivo e vir a descobrir mais tarde que já não está grávida. Este processo tem o nome de "aborto espontâneo precoce", o que não é invulgar, uma vez que 1 em 4 gravidezes são afetadas. A maioria das mulheres pode ter uma gravidez saudável depois.

8 Existe algo que deva fazer se estiver a planejar engravidar?
É uma boa ideia falar com o seu médico antes de tentar engravidar. Muitos médicos aconselham a toma de ácido fólico ou de suplementos vitamínicos pré-natais, evitar o álcool, deixar de fumar e tentar manter um peso saudável. Poderá também considerar a utilização de um teste de ovulação para ajudar a identificar os seus dias mais férteis. A Clearblue tem uma gama à disposição para ajudar a maximizar as suas hipóteses de engravidar.

Erros de teste

A ponta com alteração da cor não fica completamente rosa.
Pode não ter aplicado urina suficiente. No entanto, pode ter a certeza de que o teste funcionou se a linha de controlo aparecer no prazo de 10 minutos depois de fazer o teste.

Não aparece nenhuma linha azul no visor de controlo no prazo de 10 minutos depois de fazer o teste.

O teste não funcionou, possivelmente porque foi usada urina a mais ou a menos. Repita o teste, utilizando um novo teste e seguindo cuidadosamente as instruções.

Janela de resultado Visor de controlo



www.clearblue.com

Assistentes disponíveis entre as 14h00 e as 21h00, de segunda a sexta, excluindo feriados nos EUA.

PT 800 781 374 As chamadas são gratuitas. As chamadas são gravadas, podendo ser monitorizadas para controlo de qualidade. Por favor, tenha consigo o produto e a embalagem, incluindo os invólucros de folha de metal, quando nos contactar.

Instruções para o Clearblue Ultra Antecipado, com "CB14" impresso no invólucro. Para autodiagnóstico em casa. Apenas para uso em diagnóstico *in vitro*. Não se destina a uso interno. Não reutilizar. Manter longe do alcance das crianças. Armazenar entre 2 e 30 °C. Deixar atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de fazer o teste, se armazenado num local com refrigeração. Não usar se o invólucro estiver danificado. Não utilizar após o prazo de validade. Eliminar com o lixo doméstico normal. Não desmontar o dispositivo. Contém peças pequenas. Não ingerir nenhum componente deste dispositivo.

Se algum dos componentes for engolido acidentalmente, procurar cuidados médicos. Comunicar qualquer lesão provocada pelo uso deste produto à Clearblue.

¹79% dos resultados positivos podem ser detetados até 6 dias antes da menstruação em falta (5 dias antes do dia esperado para a menstruação).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça.

LOT	Código do lote	IVD	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>	Fabricante
Prazo de validade		Limite de temperatura 2 °C - 30 °C	Não reutilizar	

Clearblue é uma marca comercial de SPD.
© 2021 SPD. Todos os direitos reservados.